


KULLANIM TALİMATI



Şekil, en iyi sonucu almak için burun bandının nasıl yerleştirilmesi gerektiğini göstermektedir.




1 Burnunuzu yıkayıp kurulayınız.

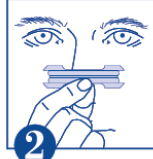

2 İçteki koruyucu tabakayı çıkarınız ve bandı şekilde gösterildiği gibi burnunuzun üzerine yapıştırınız.



3 İyice yapışması için hafifçe bastırınız.

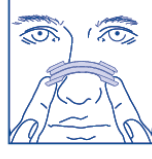

Kullandıktan sonra bandı **YAVAŞÇA** çıkarınız. Burun bandını ılık suyla yüzünüzü yıkarken ya da banyo yaparken çıkarınız. Bandın uçlarını kaldırınız ve bandı her iki tarafından yavaşça çıkarınız.

OtriNatura'dan Breathe Right burun bantları burun hava kanallarını açarak,

- Daha rahat nefes alınmasını,
- Burun tıkanıklığının giderilmesini,
- Horlamanın azalmasına yardımcı olur.

Soru ve görüşleriniz için: 444 4 083 tuketici sagligi@gsk.com

GSKTR-BR-KK001



Nasıl Etki Gösterir?

- Çift esnek bantlar burnunuzu hassas biçimde yukarı doğru kaldırır.
- Özel yapışkan, bandın rahat biçimde yerinde kalmasını sağlar.
- Burun kanallarını dışa doğru çekerek geniz yolunu açar.

Yararlı İpuçları

- Yapışkan kasma dokunmayınız.
- Yağlı cildi temizlemek için uygun bir temizleme ürünü kullanınız.
- Kullanımdan sonra cilt kuruyorsa, nemlendirici kullanınız.
- Hassas ciltler için: Bandın alt kısmının orta bölümüne losyon damlatılabilir (bandın etkisinin görülebilmesi için sadece uç kısmının yapışması yeterlidir).
- Kuru veya hassas ciltler için, Breathe Right Şeffaf Burun Bantlarını kullanabilirsiniz.
- Egzersiz/spor esnasında: Terlediğinizde bandın çıkarması için, bandı egzersiz/spora başlamadan 30 dakika önce takınız.

UYARILAR: Sadece harici kullanım içindir. Yaraların veya güneşten yanmış, tahriş olmuş cilt üzerinde kullanmayınız. Tek kullanım içindir, her bandı sadece bir kere kullanınız. Günde 12 saatten uzun süre kullanmayınız. Ciltte kızamık ya da tahriş olursa, bant kullanımını bırakınız. 5 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir. Bu ürünün ambalajı, bazı kişilerde alerjik reaksiyona yol açabilecek doğal kauçuk lateks içerir. Gece veya gündüz kullanılabılır. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. **Uyku Apnesi:** OtriNatura'dan Breathe Right Burun Bantları uyku apnesini gidermek için kullanılmamalıdır. Uyku apnesi olan kişiler doktora başvurmalıdır.

OtriNatura'dan Breathe Right Burun Bantları etkili genel olarak lokal uygulama bölgesinde görülen reaksiyonlardır. Bandın uygun bir biçimde çıkarılması uygulama bölgesinde oluşabilecek reaksiyonları azaltacaktır. Bildirilmiş olan uygulama bölgesi reaksiyonlarına örnek olarak eritema, iritasyon, ağrı, soyulma, deride sınırlı kanama, kabuk oluşması ve renkte değişme, aşırı duyarlılık reaksiyonları örnek olarak kızamık, kaşıntı ve yüzde ödem verilebilir.


TEK KULLANIMLIKTIR.

GSK Consumer Healthcare (GMDT) Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, İrlanda

OtriNatura'dan Breathe Right Burun Bantları GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. İthalatçı Firma: GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş. Büyükdere Cad.No: 173 1. Levent Plaza B Blok Levent-Şişli/ İstanbul




INSTRUCTIONS

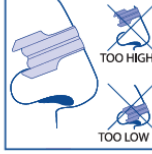

This is how the strip should be placed for best results.




1 Wash and dry your nose to remove dirt and oils

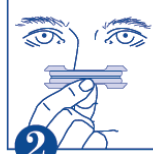

2 Remove protective liner and apply as shown.



3 Gently rub to secure.

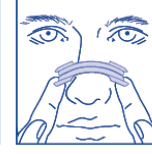

Always remove the strip **SLOWLY**. Do this while washing your face or showering with warm water. Loosen the ends, then gently lift both sides.

Breathe Right by OtriNatura Nasal Strips Opens your nose to,

- Breathe better,
- Relieve nasal congestion,
- Reduce snoring

GSKTR-BR-KK001



How they work.

- Two flexible pieces gently lift upwards.
- Special adhesive comfortably secures strip.
- Nasal passages are "lifted" open.

Helpful Hints

- Do not touch adhesive.
- Use an astringent to clean oily skin.
- If skin is dry after use, try a skin moisturiser.
- For dry or sensitive skin, use Breathe Right Clear strips.
- For sensitive skin try a drop of lotion under the center of the strip (only the ends need to adhere for the strip to work)
- For exercise/sports: Apply 30 minutes before you begin to improve adhesion when you perspire.

CAUTIONS: For external use only. Do not use over sores, sunburn or irritated skin. Do not use for more than 12 hours per day. Disposable - use each strip only once. If rash or skin irritation occurs, discontinue use. Not for children under 5 years of age. Packaging of this product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. Can be used day or night. Keep out of reach of children. Store at room temperature.

Sleep apnea: Breathe Right by OtriNatura nasal strips are not intended to treat Sleep Apnea. Persons who have symptoms of Sleep Apnea should consult their doctor.

Adverse reactions to Breathe Right by OtriNatura nasal strips are mainly local application site reactions. Proper removal of strips will decrease the likelihood of application site reactions. Examples of voluntarily reported cases application site reactions (e.g. erythema, irritation, pain, exfoliation, excoriation, bleeding, scab, and discolouration) and hypersensitivity reactions including rash, pruritus and facial edema.

FOR SINGLE USE ONLY

GSK Consumer Healthcare (GMDT) Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, İrlanda

Breathe Right by OtriNatura Nasal Strips is a registered trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.



TR 943930 - 31046117